




Ultra-Low-Dead-Space (ULDS) Injektionsnadel mit großem Innendurchmesser von ZELOSTAT™ für Mikroinjektionen von Botulinumtoxin

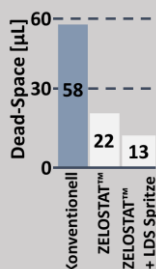


Mehr Produkt für den Patienten

Die Low-Dead-Space Technologie basiert auf einem flexiblen Polymerring, der den Totraum zwischen Nadel und Spritze ausfüllt und so die Produktverschwendung drastisch reduziert.

Bei dreimaligem Nadelwechsel lassen sich bereits deutlich über 100µl einsparen, was einem zusätzlichen Injektionspunkt für Ihren Patienten entspricht.

In Kombination mit einer Proma inject Low-Dead-Space Spritze ist die Effizienz sogar noch höher.

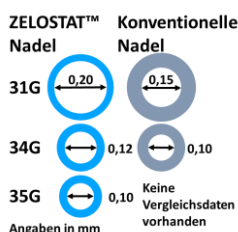


Behalten Sie Ihre Routine bei

Mit einem Innendurchmesser von 0,1mm bietet unsere 35G Nadel einen Durchfluss und Kolbendruck den Sie von einer herkömmlichen 34G Nadel kennen.

Behalten Sie Ihre Injektionstechnik bei – der Injektor spürt keinen Unterschied, der Patient fühlt weniger Nadel.

Mehr Komfort für den Patienten, geringeres Risiko von Blutergüssen

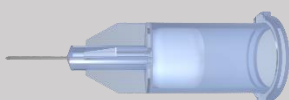

Ca. 25% dünner als herkömmliche 34G Nadeln. Unsere 35G ULDS Nadel kann das Risiko von injektionsbedingten Nebenwirkungen verringern und so den Komfort für den Patienten während der Injektion erhöhen – weniger sichtbar als invisible, sie ist ätherisch.

Artikelnummer	Außendurchmesser	Länge	Packungsgröße
100533	31G (0.25mm)	13mm	100stk
100532	31G (0.25mm)	9mm	100stk
100525	31G (0.25mm)	4mm	100stk
100539	34G (0.18mm)	9mm	100stk
100538	34G (0.18mm)	4mm	100stk
100543	35G (0.16mm)	4mm	100stk
100543-1	35G (0.16mm)	4mm	50stk

Bestellen Sie hier:



Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Richtlinie und können Änderungen unterliegen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren.

Promainject ist Teil von PromaMedical GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 10
85640 Putzbrunn – Munich,
Germany

T: +49 (0)89 7474713-0
F: +49 (0)89 7474713-1
M: info@promainject.com
W: www.promainject.com

emailen Sie uns:

